



たちあっぷ540[®]「マット切取手順書」

「たちあっぷ540」の設置時には、ベースに「マット」をセットしていただきます。
この「マット」は、「たちあっぷ540」のステップ台有無や片手すり・両手すりなどの
仕様に合わせた「マットの切取工程」が必要になります。
下記の手順に従ってマットを切り取ってください。

必要な工具・用具

※下記の工具・用具の写真は市販の参考商品です

①カッター

大きなカッターを使用してください。



②切取ガイド用 定規

長さ60cm程度で、刃が乗り上げないように
なるべく厚く、硬いものを使用してください。
金属製定規を推奨します。



③手袋

カッターを持たない方にはめてください。
耐切創性の手袋を推奨します。



切取手順


1 あらかじめ下の「マット切取位置図」で「たちあっぷ540」の仕様に合わせた切取位置を確認してください。

マット切取位置図


カット部分には、ミシン目が入っています

—— (太線)…直線で切る ● (黒丸)…丸く切り取る (スタンド部) // (斜線)…四角に切り取る (ステップ台部)

①片手すり・ステップ台なし


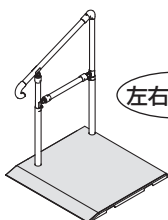


左右に注意

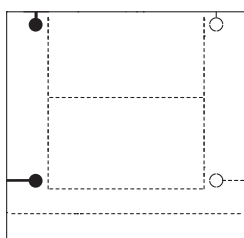


手すりの仕様に合わせて黒丸2箇所と太線2箇所を切り取ってください。

②両手すり・ステップ台なし

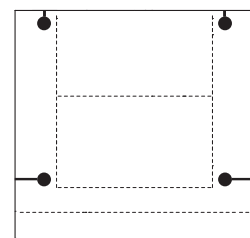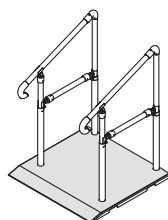


黒丸4箇所と太線4箇所を切り取ってください。

③片手すり・ステップ台1段


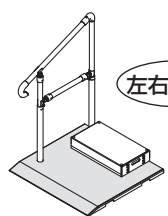


左右に注意

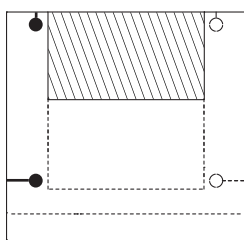


手すりの仕様に合わせて黒丸2箇所と太線2箇所、斜線部分を切り取ってください。

④両手すり・ステップ台1段

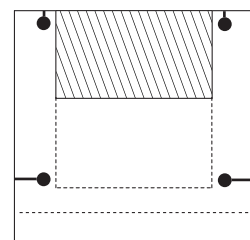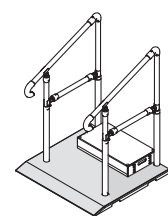


黒丸4箇所と太線4箇所、斜線部分を切り取ってください。

⑤片手すり・ステップ台2段


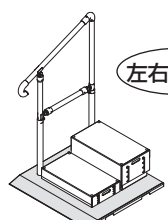


左右に注意

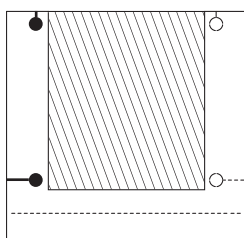

手すりの仕様に合わせて黒丸2箇所と太線2箇所、斜線部分を切り取ってください。

⑥両手すり・ステップ台2段

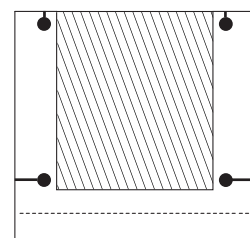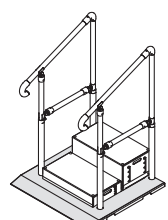

黒丸4箇所と太線4箇所、斜線部分を切り取ってください。



注意

● カッターの取り扱いには十分注意する。

ミシン目のカットは、1回で切ろうとせずに、2～3回 同じミシン目をなぞって切るようにしてください。


2 段ボールなどを下敷きにして、マット全体を平らにして裏向きの状態で置いてください。



※裏側のほうが
ミシン目がよく
見えます。

3 ステップ台が載る部分を切り取ります。


ミシン目に沿うように定規を置き、定規にカッターの刃を軽く当てながらマットを切ってください。
1回で切らずに、2～3回同じミシン目をなぞって切ってください。

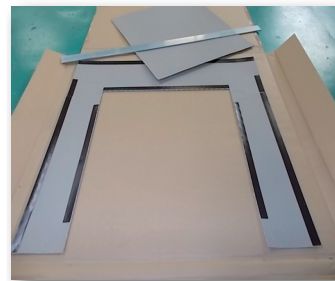


▲ステップ台 2 段の場合の切取例

4 次にスタンド部(丸型)を切り取ります。

両手すり仕様は 4 箇所、片手すり仕様は 2 箇所(左右を確認して)、切り取ります。

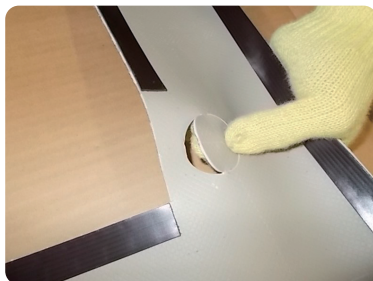

5 スタンドが取り付けられた状態でもマットが敷けるように、切れ目を入れて完成です。

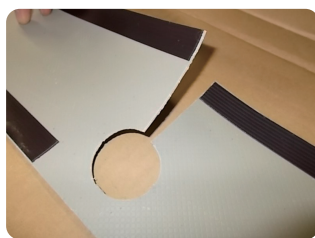

▲ステップ 2 段、両手すり仕様の場合の完成例

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店 福祉介護機器課
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■神奈川支店 福祉介護機器課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■広島支店 福祉介護機器課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■仙台支店 福祉介護機器課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■静岡支店 福祉介護機器課
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■高松支店 福祉介護機器課
〒761-8058 香川県高松市勅使町227
TEL 087(866)6411 FAX 087(867)1916

■関東支店 福祉介護機器課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■名古屋支店 福祉介護機器課
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■九州支店 福祉介護機器課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

■東京支店 福祉介護機器課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04(2944)7111 FAX 04(2944)7007

■大阪支店 福祉介護機器課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

14031403

DW-193-00