



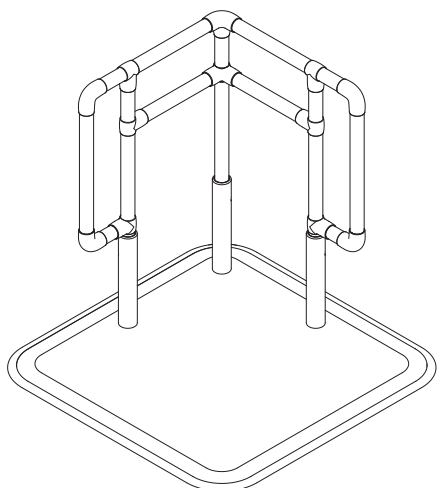

たちあっぷ でらっくす
CKI-01

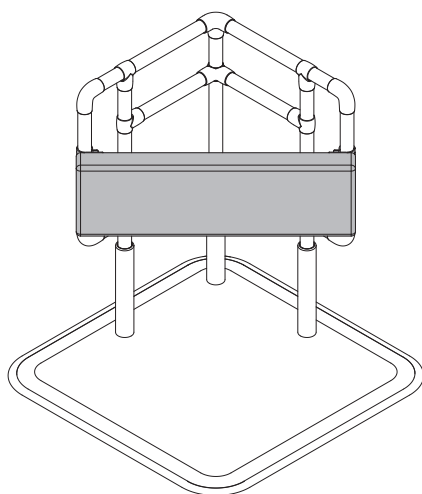

たちあっぷ ひざたちち
CKI-02
膝当て付き

目次

！安全に関する表示	2
1. メンテナンスの目安	2
2. メンテナンス方法	3
3. 消毒方法	6
4. メンテナンス部品表	6

お買い上げありがとうございます

販売店様：このメンテナンスマニュアルを必ずお読みになり大切に保管してください。

！安全に関する表示

 警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	 禁止	してはいけない内容です。
 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への障害につながる可能性がある」内容を注意しています。	 必ず守る	必ず守っていただく内容です。

1. メンテナンスの目安

場 所	状 態	対 処 方 法
全体	➡ 汚れ	➡ 2. メンテナンス方法 [1] 拭き取り
	➡ ガタツキ	➡ 2. メンテナンス方法 [2] ねじのゆるみ点検 [7] 部品交換
	➡ 部品の変形、深いキズ、亀裂	➡ 2. メンテナンス方法 [7] 部品交換
	➡ 部品がうまく取り付けられない	➡ 2. メンテナンス方法 [3] 取付方法の確認 [7] 部品交換
	➡ ねじがスムーズに回らない	➡ 2. メンテナンス方法 [7] 部品交換
ベース	➡ 塗装面のキズ、塗装の剥がれ	➡ 2. メンテナンス方法 [4] 塗装面の補修
	➡ 縁ゴムの外れ、破損	➡ 2. メンテナンス方法 [5] 縁ゴムの再接着 [7] 部品交換
	➡ 補強板（裏側）のガタツキ	➡ 2. メンテナンス方法 [2] ねじのゆるみ点検 [7] 部品交換
スタンド	➡ 塗装面のキズ、塗装の剥がれ	➡ 2. メンテナンス方法 [4] 塗装面の補修
手すりフレーム	➡ ジョイントの外れ	➡ 2. メンテナンス方法 [7] 部品交換
	➡ 手すりフレームのガタツキ	➡ 2. メンテナンス方法 [2] ねじのゆるみ点検 [7] 部品交換
マット	➡ 表面に深いキズや亀裂がある	➡ 2. メンテナンス方法 [7] 部品交換
	➡ マグネットがはがれている	➡ 2. メンテナンス方法 [7] 部品交換

場 所	状 態	対 処 方 法
膝当て	生地ほつれや破れ、 タッカー外れがある	2. メンテナンス方法 [6] 膝当てセットの交換 [7] 部品交換
	ガタツキ	2. メンテナンス方法 [2] ねじのゆるみ点検 [7] 部品交換

2. メンテナンス方法




[1] 拭き取り

- 水か中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭いてください。

⚠ 注意	
禁止	● シンナー・ベンジンなどは使用しない。 変質するおそれがあります。
	● たわしや磨き粉で磨かない。 傷がつくおそれがあります。
必ず守る	● 直射日光は避けて陰干しする。 変形や破損するおそれがあります。

[2] ねじのゆるみ点検

- 必要工具：六角レンチ（対辺 4mm、対辺 5mm）、プラスドライバー（2 番）
- 下図の①②③④⑤⑥のねじが指定トルクで締め付けられていることを確認してください。ねじがゆるんでいる場合は指定トルクでねじの締め付けを行なってください。スタンドと膝当てにガタツキがないこと、②六角穴付き止めねじ（M10 × 36）と③六角穴付き止めねじ（M8 × 6）のねじ頭がスタンド面から出ていないことを確認してください。
- 指定トルクで締め付けられていてもガタツキがある場合は部品に変形や深い傷、亀裂がないかを確認し、適切に「[7] 部品交換」を行なってください。

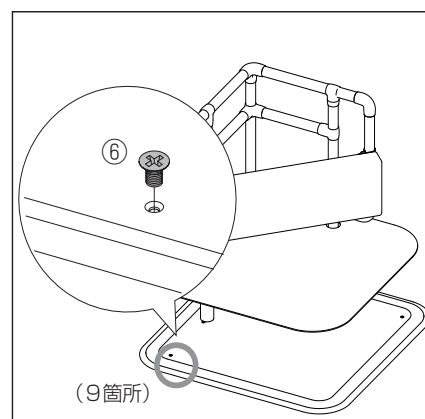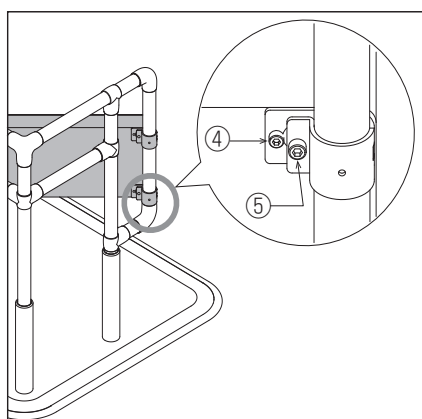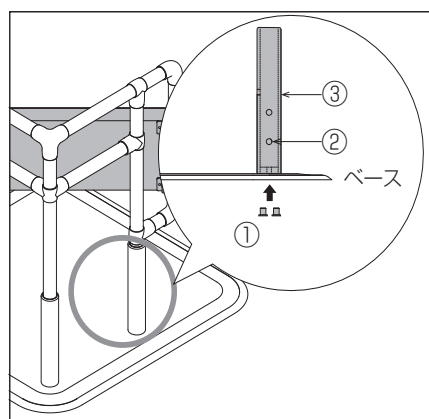

ボルトの締め付けトルク	
①	超低頭ねじ (M10×16) 9.8 ~ 11.76N・m {100 ~ 120kgf・cm}
②	六角穴付き止めねじ (M10×36) 6.9 ~ 7.8N・m {70 ~ 80kgf・cm}
③	六角穴付き止めねじ (M8×6) 3.9 ~ 4.9N・m {40 ~ 50kgf・cm}

ねじの締め付けトルク	
④	六角穴付きボルト (M5×15) 1.5N・m {15kgf・cm}
⑤	六角穴付きボルト (M6×10) 9.8N・m {100kgf・cm}

ボルトの締め付けトルク	
⑥	おもし板 ゆるみ止め付き皿小ねじ (M5×6) 1 ~ 2N・m {10 ~ 20kgf・cm}

[3] 取付方法の確認

- 正しく取り付けられているかを「たちあがりでらくす・たちあがひざたち 取扱説明書」で取付方法をご確認ください。「たちあがりでらくす・たちあがひざたち 取扱説明書」通りの取付方法でも部品がうまく取りつかない場合には、部品に変形や深い傷、亀裂がないかを確認し、適切に「[7] 部品交換」を行なってください。

[4] 塗装面の補修

- 汚れ、油を拭き取り、アクリル系塗料または専用塗料（たちあがび塗料 MB、たちあがびスプレー塗料 MB）で補修してください。※専用塗料は「4. メンテナンス部品表」を参照してください。
- 塗装を行なう際は、屋外または換気の良い場所で行なってください。密閉された作業場で行なう場合は、局所排気装置を設け、塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 塗装中は、必要に応じてマスクや手袋を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。

[5] 縁ゴムの再接着


- 必要工具：接着剤、カッター
 - 推奨接着剤：アロンアルファ EXTRA4020（東亜合成株式会社製）。※アロンアルファは東亜合成株式会社の登録商標です。
 - ゴムに破損や劣化がある場合には「[7] 部品交換」を行なってください。
 - 縁ゴムの再接着及び部品交換は下記の方法で行なってください。
 - (1) ベースに取り付いている縁ゴムを取り外し、ベースに残っている接着剤を取り除いてください。再接着する場合は、縁ゴムに残っている接着剤も取り除いてください。
 - (2) 取り付ける縁ゴムとベースを接着剤にて接着してください。
 - (3) 縁ゴムの継ぎ目も接着剤にて接着してください。
 - (4) 養生し、縁ゴムが確実にベースに接着されていることを確認してください。
- ※弊社メンテナンス部品としては縁ゴム接着剤（CKA-AH）をご用意しております（P.8 参照）。

⚠ 注意	
 必ず守る	● 接着剤は、使用する商品の取扱説明書をよく確認し作業する。

[6] 膝当てセットの交換

- 用意するもの：

1. 新しい膝当てセット

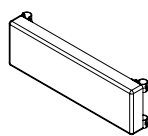


2. 六角レンチ（4mm）




3. 六角レンチ（5mm）




6-1. スタンドからフレームを取り外してください。

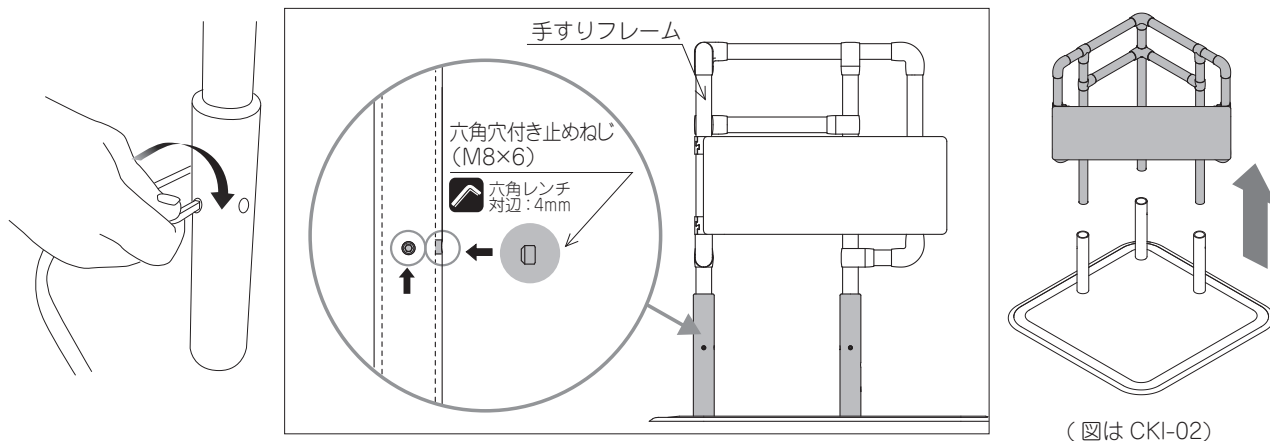


6-2. 六角穴付きボルト (M6 × 10) を六角レンチでゆるめて、取付金具 B を取り外してください。(4箇所)

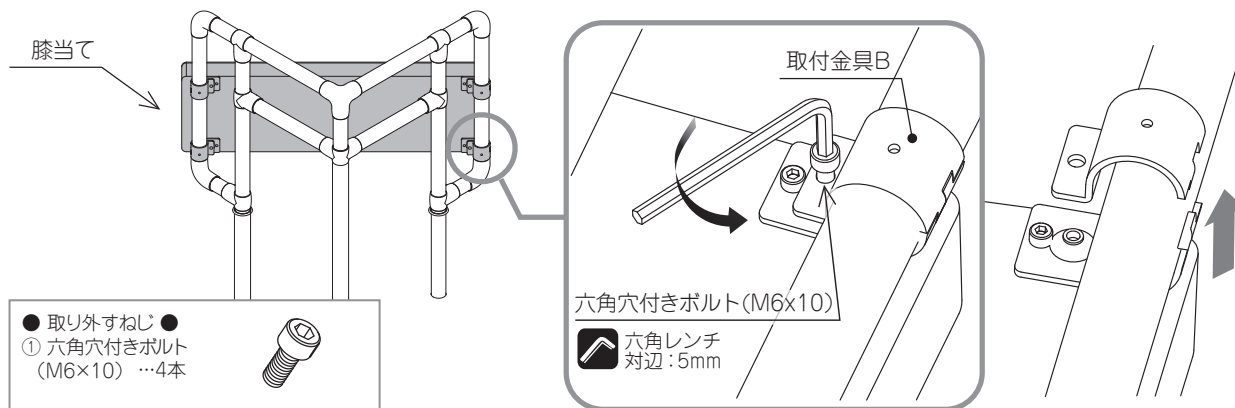

6-3. 新しい膝当てを安定した台の上に置き、その上からゆっくりフレームを置きます。フレーム位置を決めて、取付金具 B をはめます。

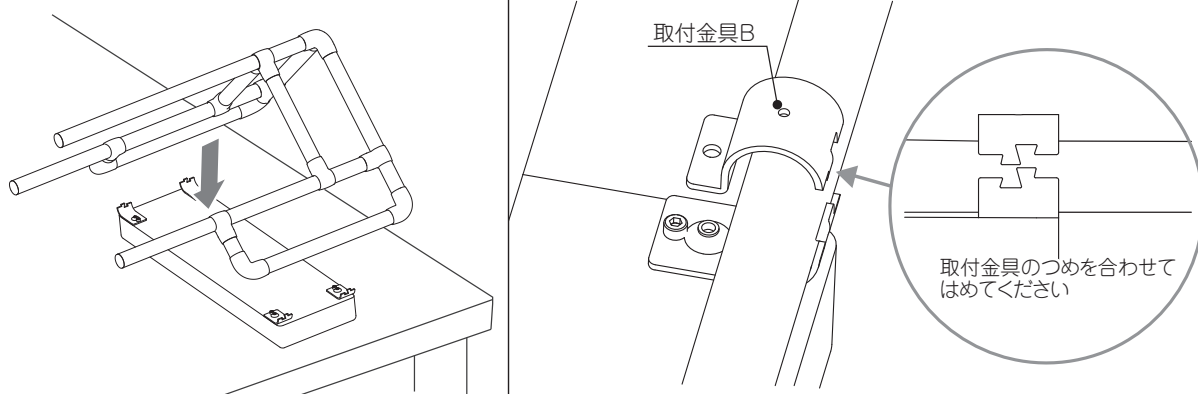

6-4. 取付金具 A のナットの位置と、取付金具 B の穴位置が合っていることを確認し、六角穴付きボルトを仮締めしてください。(4箇所)

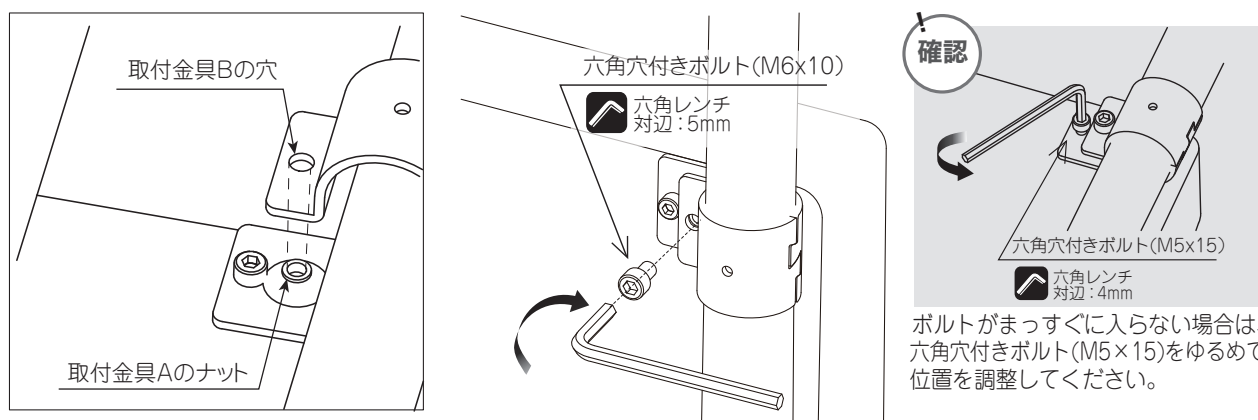

⚠ 注意




必ず守る

●必ず仮締めをしてから本締めしてください。


急に本締めしてしまうと六角穴付きボルトがうまく取り付けられない場合があります。

●取付穴にボルトをまっすぐ入れて締め付ける。

まっすぐになっていないと最後まで完全に締め付けられないため、ガタツキまたは部品の破損の原因になります。

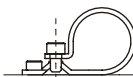


6-5. 仮締めした六角穴付きボルト (M6 × 10) を確実に締めこんでください (4箇所)。また、六角穴付きボルト (M5 × 15) をゆるめた場合は、六角レンチで確実に締めこんでください (4箇所)。

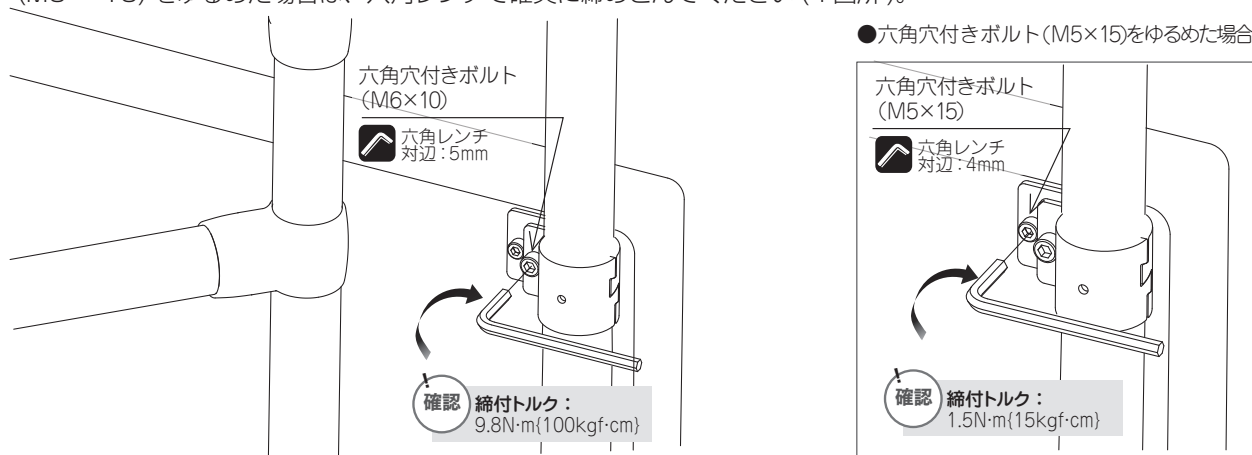

組立て完了後に必ず下記事項をご確認ください

- ・膝当てがきちんと膝にあたる位置にあること。
- ・膝当てセットのガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れがないこと。

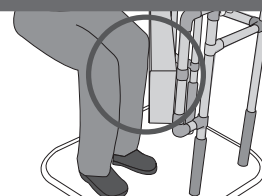

[7] 部品交換

- メンテナンス部品は「4. メンテナンス部品表」を参照してください。
- 膝当ての交換方法は「[6] 膝当てセットの交換」を参照してください。
- 縁ゴムの部品交換の方法は「[5] 縁ゴムの再接着」を参照してください。
- 膝当て・縁ゴム以外の部品交換の方法は「たちあっぴ でらっくす・たちあっぴ ひざたち取扱説明書」の組立手順を参照してください。

3. 消毒方法


- 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
- アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。
- この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。
- 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する商品の使用方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用してください。
(参考：次亜塩素酸 6%水溶液なら 120 倍～ 300 倍程度に希釈)

⚠ 注意




● オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しない。
変質して破損するおそれがあります。

4. メンテナンス部品表







CKI-01

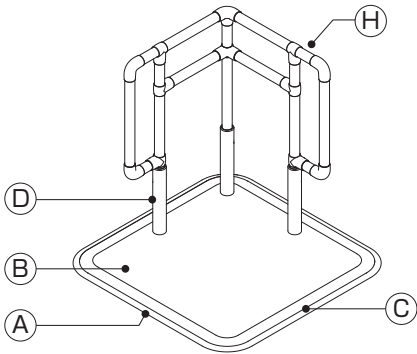


CKI-02

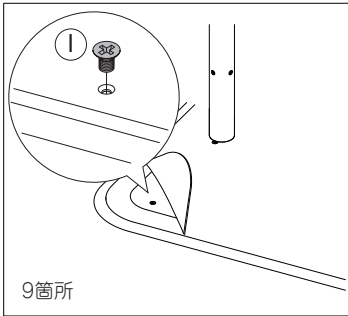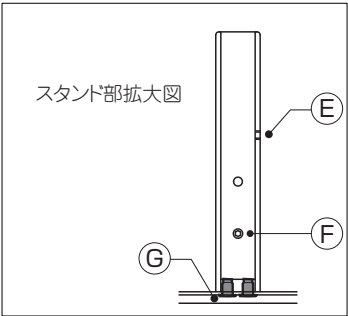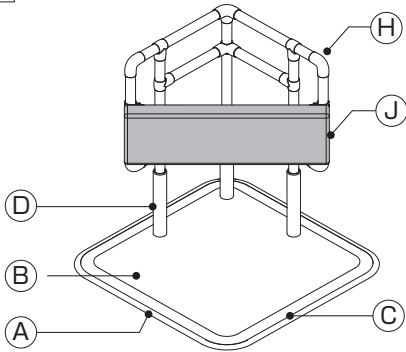

記号	対象品番	部品名	部品番号	部品図	材質	入数
A	共通	たちあっぴ でらっくす ベース	CKI-A		スチール (表面塗装) 縁部：ゴム	1 台
B	共通	たちあっぴ でらっくす ベースマット	CKI-B		樹脂	1 枚

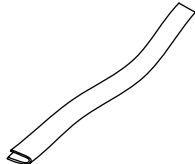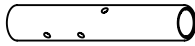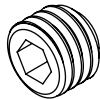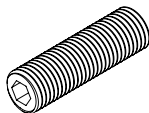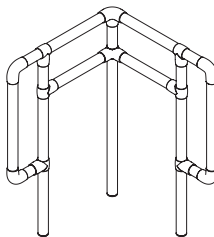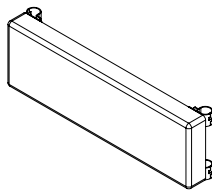記号	対象品番	部品名	部品番号	部品図	材質	入数
C	共通	たちあっぶ縁ゴム S BR	CKA-ADS 3M		ゴム	3m × 5 本
D	共通	たちあっぶスタンド (ねじセット付)	CKA-BA		スチール	1 本
E	共通	六角穴付き止めねじ (M8 × 6)	CKA-BB M8 × 6		ステンレス	10 本
F	共通	六角穴付き止めねじ (M10 × 36)	CKA-BC M10 × 36		ステンレス	10 本
G	共通	超低頭ねじ (M10 × 16)	CKA-BD M10 × 16		ステンレス	10 本
H	共通	たちあっぶ でらっくす 手すりフレーム	CKI-F01		ジョイント：樹脂 パイプ：樹脂被膜 スチール パイプ	1 台
I	共通	おもし板 ゆるみ止め付き 皿小ねじ	CKA-J2A SUS M5 × 6 50 個		ステンレス	50 本
			CKA-J2A SUS M5 × 6 10 個			10 本
J	CKI-02	膝当てセット (取付金具付き)	CKI-E		膝 当 て：樹脂 取付金具：スチール	1 式

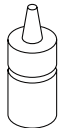記号	対象品番	部品名	部品番号	部品図	材質	入数
—	共通	緑ゴム接着剤	CKA-AH		シアノアクリレート	1 本 (20g)
—	共通	たちあっぱ 塗料 MB	CKA-AF		アクリル系塗料	1 本 (15ml)
—	共通	たちあっぱ スプレー塗料 MB	CKA-AS		アクリル系ラッカー塗料	1 本 (300ml)
—	共通	六角レンチ (対辺 4mm)	CKA-MH 4M		スチール	5 本
—	共通	六角レンチ (対辺 5mm)	CKA-MJ 5M		スチール	5 本
—	共通	注意喚起シール	CKA-GB		樹脂	50 枚
—	共通	注意喚起シール	CKA-GCA		樹脂	50 枚

※製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

● 矢崎化工株式会社

介護支援ページ
kaigo-web
<http://www.kaigo-web.info/>

■ 本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

■ 北海道支店 福祉介護機器課
〒072-0007 北海道美幌市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 仙台支店 福祉介護機器課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 関東支店 福祉介護機器課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■ 東京支店 福祉介護機器課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007

■ 神奈川支店 福祉介護機器課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■ 静岡支店 福祉介護機器課
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■ 名古屋支店 福祉介護機器課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■ 大阪支店 福祉介護機器課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■ 広島支店 福祉介護機器課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■ 九州支店 福祉介護機器課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

16032304
DW-219-02