



Support your life

たすあっぱる[®] サムリング[®]


製品一覧

マットカラー：


● GR (グレー) ● DGR (ダークグレー) ● BR (ブラウン) ● B (ブルー) ● G (グリーン)



CKM-02

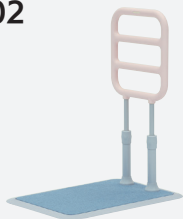


質量 17.5 kg

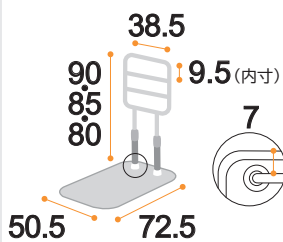


外寸法：cm

CKM-02W

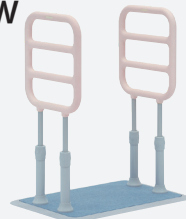

質量 22.0 kg

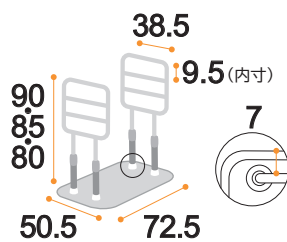


外寸法：cm

CKM-04



質量 18.0 kg

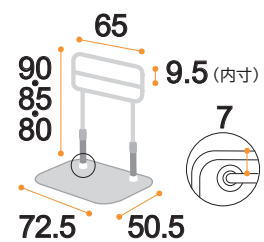

外寸法：cm

材質 手すりフレームセット：(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)プラスチック
ベースセット：(ベース板 表面)スチール (その他) プラスチック
マット：(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂

オプション品

サムリング ベッドでとまるくん



CKM-CK

質量：670 g

寸法 ベッド下部取り付け可能高さ：2.5～30cm

材質 本体：アルミ合金・ゴム
ツマミ：ステンレス
六角穴付き止めねじ：ステンレス

サムリング かいじょくん



CKM-K

質量：1.1 kg

材質 フレーム：ウレタン樹脂被覆
スチールパイプ
連結金具：アルミ合金
ネジ・ボルト：ステンレス



外寸法：cm




かいじょくんはサムリングに対して90度方向のみ取り付け可能です。



こだわりの手すり

最大手すり高さ 90cm

高身長の方にも使いやすくなっています。

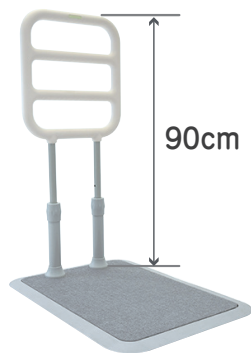


にぎりやすい ディンプル形状付き

すべりにくく、握りやすいディンプル形状は、握力が弱い方でも手に馴染みます。




夜間でも視認可能 蓄光ポイント付き

蓄光ポイントが入っているため、夜間でも手すりの位置がわかります。

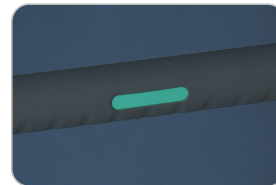

便利で安心のベース

コンパクトサイズ

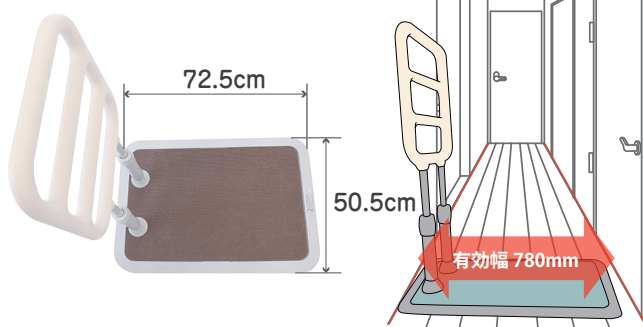

どこにでも置ける 小さいベース

廊下の幅に収まるサイズ、個室トイレにも設置可能です。



なだらかなスロープ 形状ベース


屋内で「車いす」や「歩行車」をお使いの方にもおすすめです。



より安心感のある両手すりタイプ

両手すりタイプ

CKM-02Wは両手すりのため、両手で手すりを握り、身体を支えることができます。

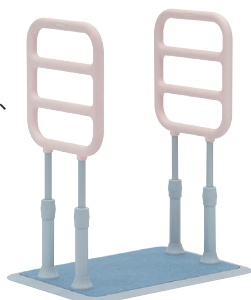

ソファからの立ち座り、段差の昇り降り、廊下の移動など、より安全に行えます。



設置らくらく

工具いらずの新スタンド

工具を使わず組み立て、高さ調整が可能です。



持ち運びしやすい ベース

持ち運びがしやすいよう、ベースに取っ手が付きしました。



かいじょくん で使い道が広がる！



ポイント 1

L型手すりの構築

かいじょくんはサムリングと組み合わせることでL型手すりが構築できます。

ポイント 2



足元すっきり

かいじょくんの下に支柱がないため、使用時に動作の邪魔になりません。

ポイント 3

設置バリエーション

ベッドサイド以外でも使用可能です。
「CKM-02」は2段階の高さで取付可能です。

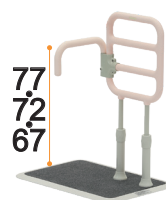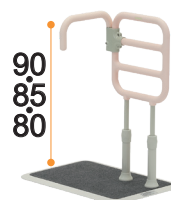

外寸法：cm

ソファやイスに



洗面所に




トイレに



設置
OK

「ベッドでとまるくん」が不要な使用方法


かいじょくんを使用するときに、サムリングのベースに足が乗る場合は「ベッドでとまるくん」が不要です。

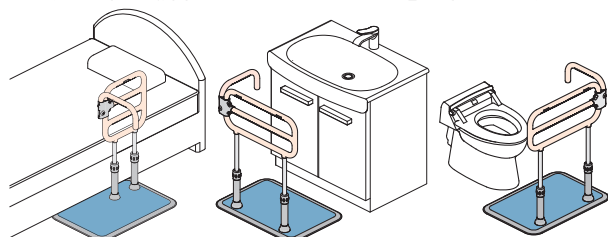

※身体状況や設置環境によって安定性が不足する場合は、「ベッドでとまるくん」を使用してください。

「ベッドでとまるくん」が必要な使用方法


かいじょくんを使用するときに、サムリングのベースに足が乗らない場合は「ベッドでとまるくん」が必要です。

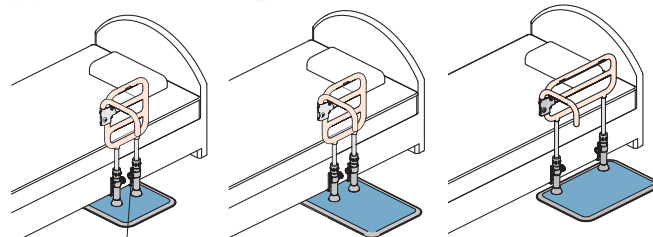

ベッドでとまるくん

設置
NG

「かいじょくんフレーム」がベースから大きくはみ出した状態で設置しない。

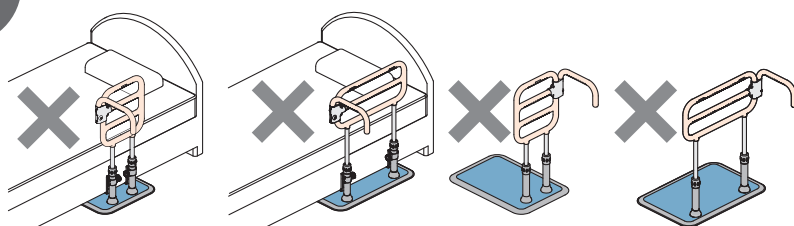


※この設置方法は「ベッドでとまるくん」を取り付けても不可です。

警告

- 「かいじょくんフレーム」の下にベースがない状態で設置しない。ベースが浮き上がり転倒するおそれがあります。



禁止



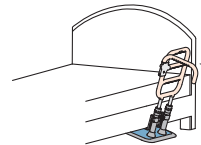


TAISコード一覧表

タイプ	スタンダードタイプ				
形状					
品番	CKM-02 SET GR	CKM-02 SET DGR	CKM-02 SET BR	CKM-02 SET B	CKM-02 SET G
本体 TAIS コード	00055-000302	00055-000303	00055-000304	00055-000305	00055-000306

+ オプション品セット

サムリング ベッドでとまるくんセット					
ベッドでとまるくん CKM-CK	00055-000320	00055-000321	00055-000322	00055-000323	00055-000324
サムリング かいじょくんセット					
かいじょくん CKM-K	00055-000345	00055-000346	00055-000347	00055-000348	00055-000349
サムリング かいじょくんセット (ベッドでとまるくん付)					
かいじょくん ベッドでとまるくん CKM-K CKM-CK	00055-000333	00055-000334	00055-000335	00055-000336	00055-000337

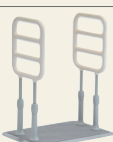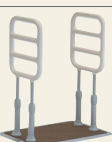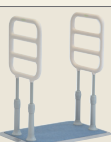タイプ	ダブルタイプ				
形状					
品番	CKM-02W SET GR	CKM-02W SET DGR	CKM-02W SET BR	CKM-02W SET B	CKM-02W SET G
本体 TAIS コード	00055-000308	00055-000309	00055-000310	00055-000311	00055-000312

タイプ	ロングタイプ				
形状					
品番	CKM-04 SET GR	CKM-04 SET DGR	CKM-04 SET BR	CKM-04 SET B	CKM-04 SET G
本体 TAIS コード	00055-000314	00055-000315	00055-000316	00055-000317	00055-000318

+ オプション品セット

サムリング ベッドでとまるくんセット					
ベッドでとまるくん CKM-CK	00055-000326	00055-000327	00055-000328	00055-000329	00055-000330
サムリング かいじょくんセット					
かいじょくん CKM-K	00055-000351	00055-000352	00055-000353	00055-000354	00055-000355
サムリング かいじょくんセット (ベッドでとまるくん付)					
かいじょくん ベッドでとまるくん CKM-K CKM-CK	00055-000339	00055-000340	00055-000341	00055-000342	00055-000343

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護部門
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■広島支店
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

■関東支店
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-38-4562 FAX 0276-38-3522

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■九州支店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

矢崎化工株式会社は、国際規格であるISOを認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ (<https://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

お問い合わせ先

25032503

DW-326-00