

トイレ固定用アングルⅡタイプ

トイレ用たちあっぱⅡ[®] CKJ-02

「壁面へ突っ張る固定」と「便器をはさみ込む固定」、
2つの方法で固定できます！



軽くて錆にくい
アルミ製

特長

壁面へ突っ張る固定が可能


- 床面にしっかりと固定されていない便器、また、樹脂製の便器で、はさみ込みに不安がある便器などには、壁面へ突っ張る方式で固定することができます。

寸胴型便器に取付可能

- 寸胴型の便器に、はさみ込んで固定でき、簡単に取付けることができます。

安全
設計

ワンタッチではね上げ
動作の邪魔になりません

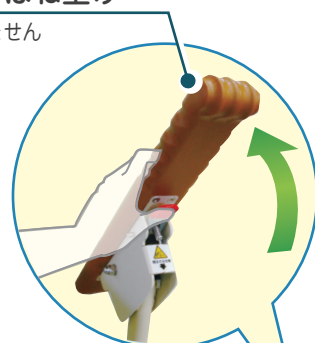

1 手すり高さ調整



58～68cmまで5段階(25mmピッチ)で調整可能です。

2 幅調整



45～60cm(芯寸法)まで無段階で調整可能です。



脚部はスロープ形状
横からの移乗にも配慮しました

安全
設計




※寸胴型以外の便器の取付けに適したタイプ「CKJ-01」もございます。

※便器は他社製品です


壁面へ突っ張る固定

●壁幅730～900mmのトイレへ取付可能です。

床面にしっかり固定されていない便器、樹脂製便器などの場合、壁面へ突っ張って固定できます。

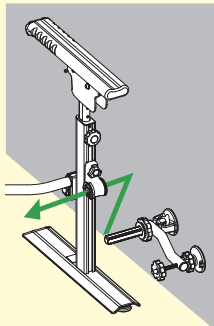


壁側から差し込む

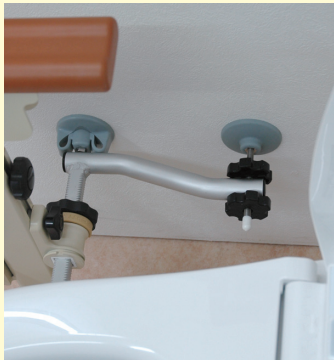

便器をはさみ込む固定

●幅220～420mmの便器へ取付可能です。

寸胴型便器（タンクレストイレ）をはさみ込んで固定ができます。（この固定方法は寸胴型便器のみです）

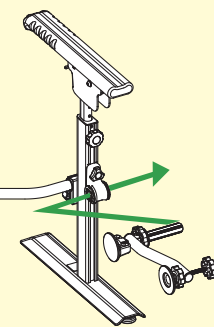

便器側から差し込む



※壁面の状況や便器の形状によって取り付けられない場合があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。


仕様



トイレ用たちあっぷ® II

CKJ-02
90,420 円
(税抜 82,200 円)

JANコード	4979652526229	TAISコード	00055-000185
質 量	約7.1 kg	使用者体重	100 kg以下
カ ラー	ライトベージュ(LBG)		
材 質	本 体：アルミ、ステンレス アームレスト：発泡樹脂		

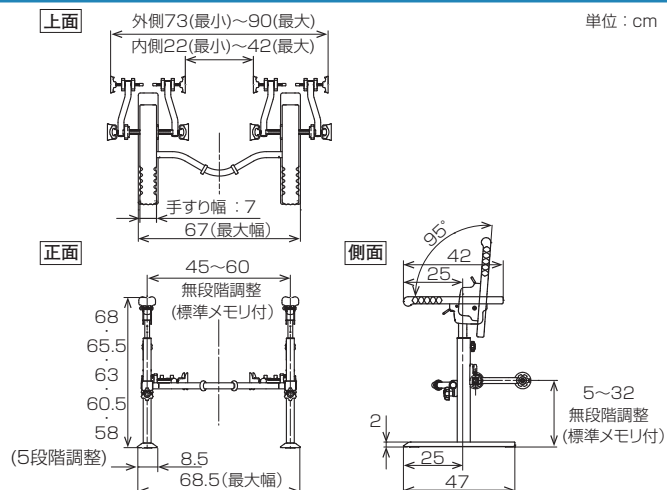

●製品の仕様は予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。●記載価格の総額表示は、消費税10%の価格です。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県大山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■九州支店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県横浜市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

介護支援ページ
kaigo-web
<http://www.kaigo-web.info/>



■関東支店
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-38-1511 FAX 0276-38-3522

■静岡支店
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL 054-286-1101 FAX 054-286-3988

■広島支店
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

お問い合わせ先

矢崎化工株式会社は、国際規格であるISOを認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

16072302

DW-229-03