




3章

トイレ介助商品

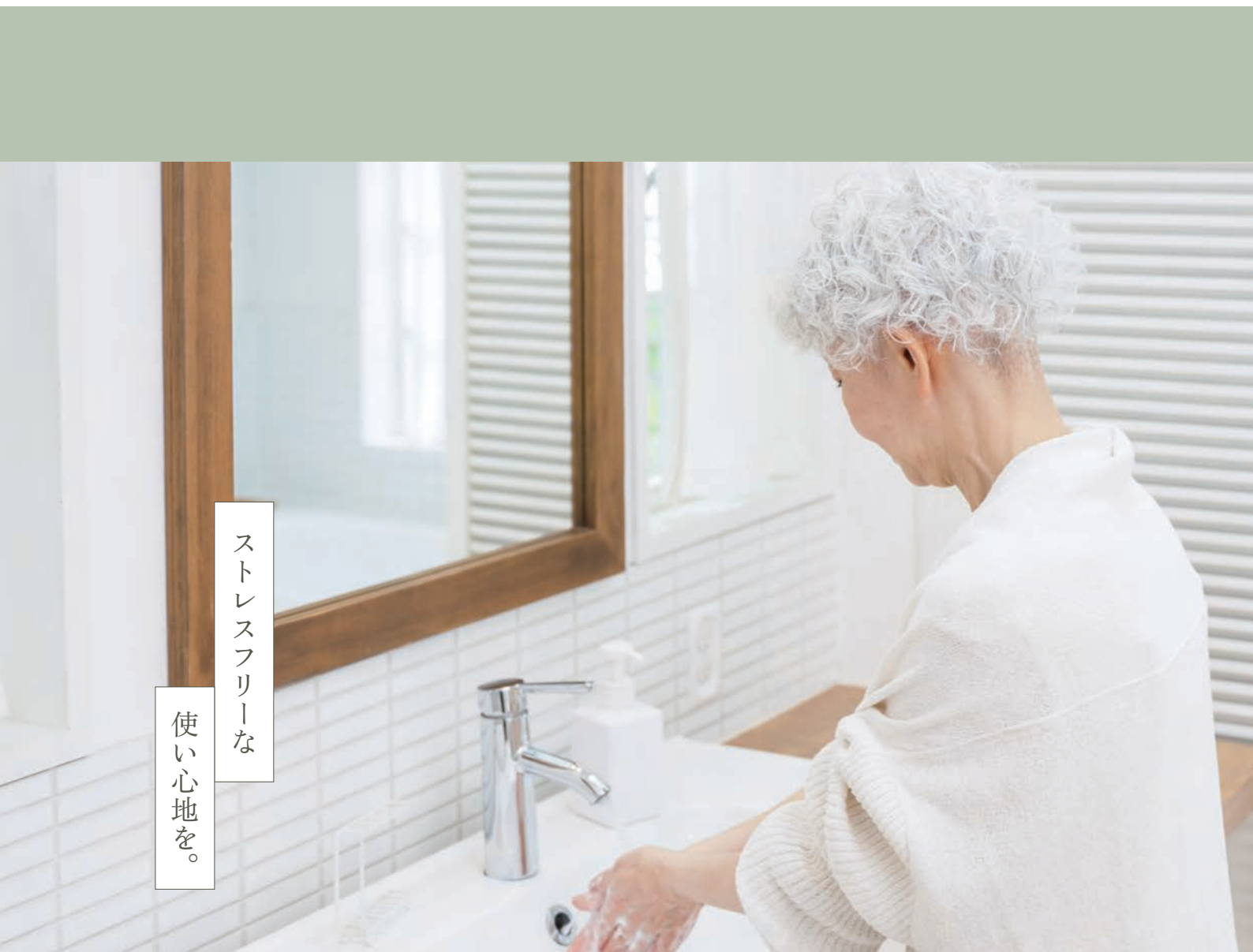


ストレスフリーな

使い心地を。

トイレにおける必要な介助に合わせて、移動や座位保持・立ち上がりをサポートする製品をご紹介します。

活用ポイントMAP

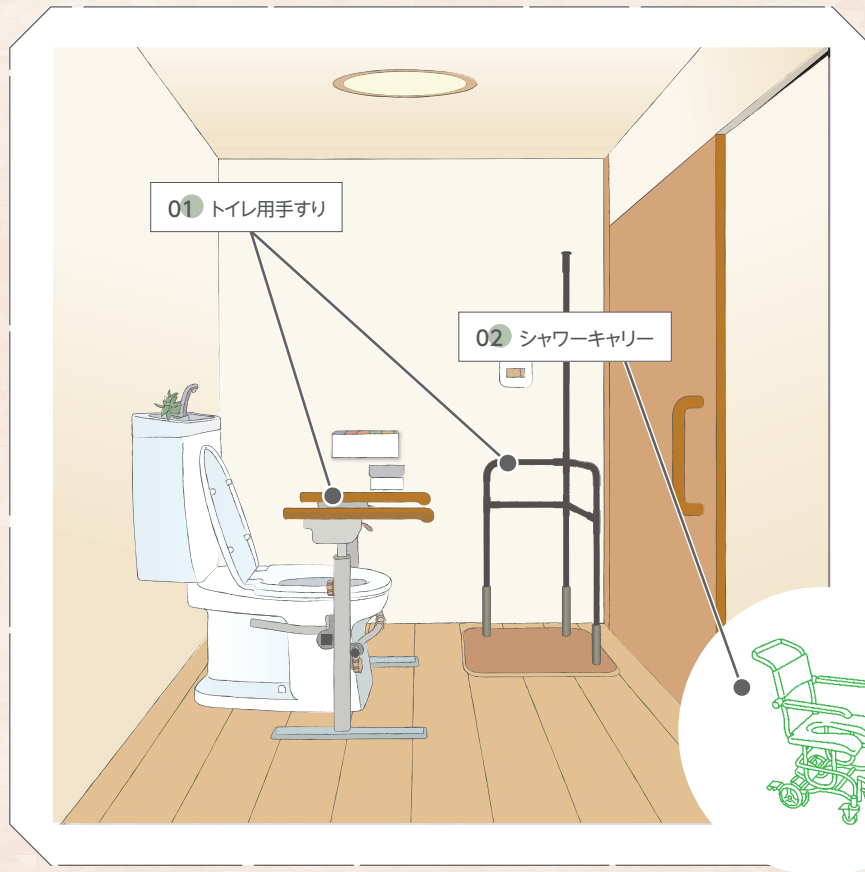

01 トイレ用手すり

トイレでの立ち座り・便座での座位保持がラクに

トイレ用 たちあつぷⅡ ▶P.74、75



CKJ-01



CKJ-02

たちあつぷⅡたててすり ▶P.73



CKI-31

02 シャワーキャリー

居室や脱衣所から洗い場への移動や、洗体をスムーズに

シャワーキャリーフロントレストタイプ ▶P.76



CAK-600



CAK-029

● P.78 TAIS コード一覧

● P.78 JAN コード一覧



トイレ補助

たちあっぷⅡ



たちあっぷⅡたててすり
CKI-31
 115,390円 (税抜 104,900円)
 質量：20.9kg

製品詳細は P.22 をご覧ください。

たちあっぷⅡたててすり導入事例

★ こんなお悩みを解決！ ★

使いやすい位置に手すりが欲しい



便器の手前に手すりがあることで、引っ張り立ちでき立ち上がりがしやすくなりました。

トイレ移乗台導入事例

車いす等からトイレへの移乗・座位保持のために



天板の素材は、水洗い可能なソフトマットや汚れた時に拭き取りやすいレザーシートもご利用頂けます。

■トイレ移乗台



■少ない着座スペース

便器の座面はいろいろな形状がありますが、基本的に着座スペースは少なく、立位から座ったり、車いす等からの移乗は困難になります。



トイレ移乗台

便器の左右に便座の形状に合わせた台を設置し、便座に乗り移ります。

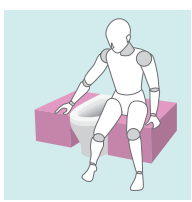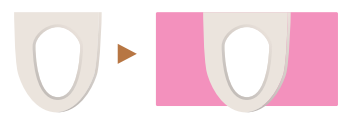

■移乗方法一例

1 移乗台の前にアプローチします	2 手すり等を支えにしながら方向転換をします	3 移乗台に腰掛けます	4 手をついて、腕の力で徐々に便座へ移動します

■便座の高さ

便器の高さも移乗のしやすさに影響します。高さが低い場合は補高便座等の使用をご検討ください。

トイレ立ち上がり補助

介護保険 貸与

トイレ用 たちあっぷ® II

トイレでの立ち座り、便座での座位保持が不安な方に。工事不要の手すりです。

製品紹介動画
はこちら設置手順動画
はこちら

写真の便器は他社製品です。

Point 1

腕をのせやすく、握りやすい手すり



上面中央のくぼみに腕・肘がフィットし、ディンプル形状でしっかりと握れます。また、腕が疲れにくい発泡樹脂製です。

Point 2

全長 42cmのアームレスト



腕全体をのせられるため、座位が安定します。前方に長いので立ち上がりをしっかりサポートします。




トイレ用 たちあっぷ II
CKJ-01
80,080円 (税抜 72,800円)


製品情報

材質	本体：アルミ、ステンレス	アームレスト：発泡樹脂
最大使用者体重	100kg 以下	
質量	6.8kg	


上面

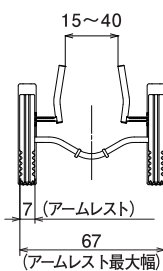

正面

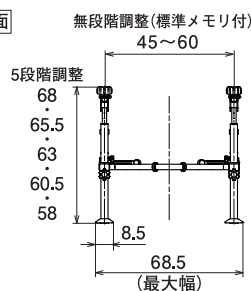

側面

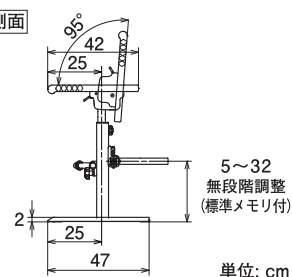

単位: cm

ご利用者様の状況、使用場所の環境に合わせて調整が可能

●ご利用者様のご使用状況にあわせてアームレストの高さ・幅調整ができます。



高さ調整
58～68cm まで 5段階 (25mm)
ピッチで調整可能です。




幅調整
45～60cm (寸法) まで
無段階で調整可能です。

抗菌仕様



ワンタッチではね上げ
ドアが横にあるトイレなどでも、ワンタッチではね上げることができますため、移乗の際の邪魔になりません。

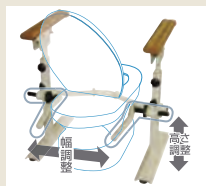

様々な便器に調整取り付けが可能
固定用アングルを調整することで、様々な便器形状に合わせて取り付けが可能です。



軽いアルミ製で、取り回しがしやすい
アルミ製で軽量なため、取り回しがしやすく、トイレ内で組立設置ができます。取り付け工事は不要です。

壁固定設置手順動画
はこちら



介護保険 貸与 トイレ用 たちあっぷ® II

タンクレストイレや特殊形状の便器に手すりを取り付けたい方に。



写真の便器は他社製品です。

Point 1

タンクレストイレに取付可能



寸胴型便器には吸盤式のアンクルで挟み込んで固定することが可能です。

Point 2

壁面へ突っ張り固定




床面にしっかり固定されていない便器や樹脂製の便器の場合は、壁面へ突っ張ることで固定することが可能です。



トイレ用 たちあっぷ II
CKJ-02
90,420 円 (税抜 82,200 円)

製品情報

材質	本体：アルミ、ステンレス	アームレスト：発泡樹脂
最大使用者体重	100kg 以下	
質量	7.1kg	

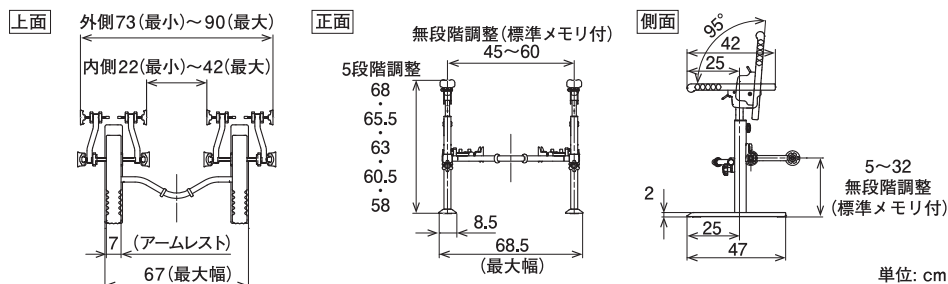

固定方法

幅 22 ~ 42cm の便器へ取り付け




壁幅 73 ~ 90cm のトイレへ取り付け



別売品 トイレ固定用アングル II



CKJ-01 の固定用アングルと差替え可能です。

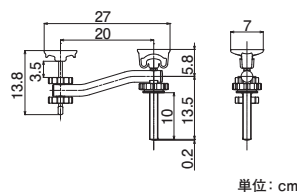

CKJ-E
24,750 円 (税抜 22,500 円)

材質 アルミ、ゴム、樹脂、ステンレス
質量 0.9kg (左右セット)

介護保険 購入

シャワーキャリー フロントレストタイプ

より排便しやすい「前屈姿勢」を保ちやすく、キャリー前面に身体の受け部があるシャワーキャリーです。



Point 1

前受けタイプの排便補助キャリー



前受けテーブルにもたれかかすることで、排便がしやすい前屈姿勢を無理なくとることができます。

Point 2

便器にそのままセット



利用者を乗せたまま洋式トイレにセットできます。

シリーズ共通情報


品番	CAK-600	CAK-029
材質	フレーム：アルミ、ステンレス 座面：EVA樹脂 座面用クッション：ポリエステル、ナイロン キャスター：プラスチック	フレーム：イレクター 座面：EVA樹脂 キャスター：プラスチック
仕様	キャスターサイズ：φ100（前輪自由車） φ200（後輪固定車） 最小回転半径：74cm 最大利用者体重：80kg 座面高さ調整：2cm間隔 4段階	キャスターサイズ：φ100（4輪自由車） 最小回転半径：57cm 最大利用者体重：80kg




シャワーキャリーフロントレストタイプ アルミ製

CAK-600

264,550円（税抜 240,500円）

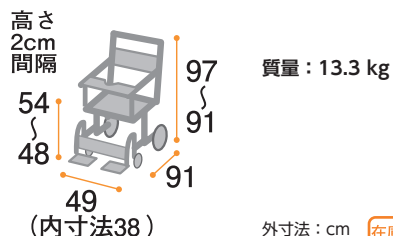


CAK-600

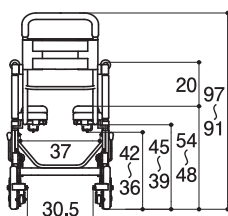

シャワーキャリーフロントレストタイプ イレクター製

CAK-029

165,330円（税抜 150,300円）

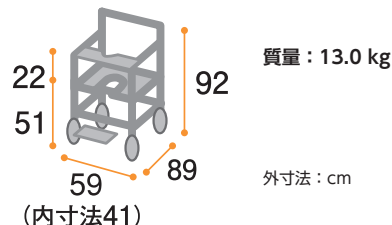

●このページの掲載商品 CAK-600 は、約2～4日でお届けいたします。
CAK-029 は、約10～14日の製作日数がかかります。納期については販売店にご確認ください。

シャワーキャリー フロントレストタイプ やさしさポイント

☑CAK-600



移乗が簡単。

肘掛けをはね上げるにより、ベッドへの移乗をスムーズに行うことができます。

☑CAK-600



4段階の座面高さ調整。

2cmごと、4段階の高さ調整が可能です。
(座面高さ 48・50・52・54cm)

☑CAK-600



脚を守るサイサポート。

走行中にひざが広がらないようにサポートされて、脚が落ちる心配がありません。
また、移乗の時は折りたたむこともできます。

☑CAK-600 ☑CAK-029



おしりの洗浄が楽。

後ろから手を差し入れやすい構造になっているので、排便後のスキンケアや座葉の挿入が簡単です。

☑CAK-600 ☑CAK-029



お尻が開きやすい座面。

座面の穴は、小さめで小柄な方でも安心です。
座るとお尻が自然と開きます。

開発協力：
神奈川県立保健福祉大学
保健福祉学部 リハビリテーション学科
作業療法専攻 教授 玉垣 努氏

ここでも活躍！

排便促進のしくみ

日常生活でくり返し行われる「排便行為」。これをより楽に行うことは、快適な暮らしのためのとても重要なポイントとなります。福祉用具を使用することにより、とられる「前屈姿勢」には、理にかなった排便促進作用を生む効果があります。

排便に必要な「前屈姿勢」がポイント

従来のポータブルトイレにも、背もたれやひじ掛けが付いているものがあります。これはあくまでも座位をささえる意味でしかありません。

「座る」ということだけでなく、「排泄」という行為を考えるとどうでしょうか。

排便姿勢を考えると、どなたも「身体を前屈し重心を前方に掛ける体勢」になることに気が付きます。無意識のうちにやっているこの姿勢は、実は非常に合理的で、排便しやすい効果があるのです。

右の二次元コードから詳細をご覧ください。



シャワーキャリー
フロントレストタイプ P.76



前受けテーブル P.96





可動式手すり CFA-8 P.189

より詳しい排便促進のメカニズムやフロントレストキャリーの開発経緯はホームページにも掲載しております。

TAIS コード一覧

「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済の TAIS コードです。

トイレ用 たちあっぷ® II

タイプ		
形状		
品番	CKJ-01	CKJ-02
本体 TAIS コード	00055-000130	00055-000185

シャワーキャリー フロントレストタイプ

タイプ	アルミ製	イレクター製
形状		
品番	CAK-600	CAK-029
本体 TAIS コード	00055-000054	—

JAN コード一覧

商品名	品番	JAN コード
トイレ用 たちあっぷ II	CKJ-01	4979652520777
トイレ用 たちあっぷ II	CKJ-02	4979652526229
トイレ固定用アングル II	CKJ-E	4979652524850
シャワーキャリーフロントレストタイプ アルミ製	CAK-600	4979652502766